


Patientenhandgeräte PHG7-FT

Datenblatt-Nr.: 300592 / Stand: 2024/05/17

Image not found or type unknown

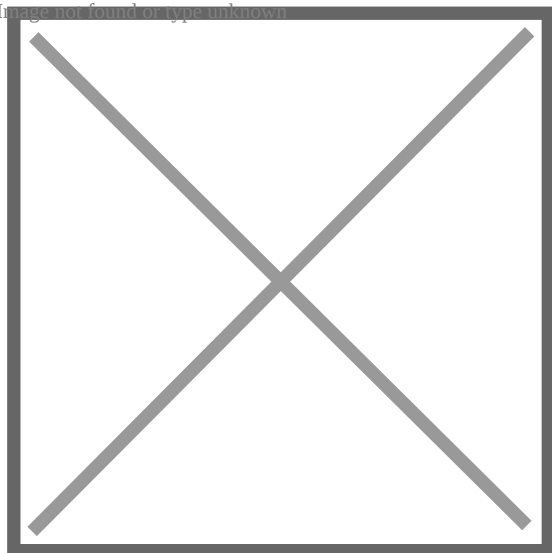

Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Patientenhandgeräte PHG7-FT

Artikelnummer: 300592

Bezeichnung neu: PHG7-FT

Kurzbeschreibung neu: PHG7-FT

Bezeichnung alt: Patientenhandgerät P7 mit
Ruftaste, 1 Lichttaste, 1 Funktionstaste grau,
Lautsprecher und Mikrofon

Kurzbeschreibung alt: PHG7

Verwendung: Rufsystem P7

Jedem Bett muss eine Einrichtung zur Rufauslösung zugeordnet sein, die vom Patienten bequem und sicher erreichbar ist. Die Handgeräte von hospicall erfüllen nicht nur diese Anforderung der DIN VDE 0834-1, sondern berücksichtigen neben der intuitiven Bedienung durch die Patienten/Bewohner auch die Belange des Pflegedienstes bzw. der Haustechnik.

Patientenhandgeräte PHG7-FT verfügen über eine leicht zu reinigende antibakterielle Folientastatur, intuitiv bedienbar, mit ertastbaren und gut erkennbarem Druckpunkt versehenen Tasten. Große transluzente Ruftaste (rot) mit integriertem Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung, Lichttaste gelb mit Lampensymbol zur Steuerung einer Lichtquelle über Stromstoßrelais, Funktionstaste grau sowie integriertes Mikrofon und Lautsprecher zur diskreten Kommunikation mit dem Pflegedienst. Automatische Umschaltung zwischen diskreter Sprache und freier Sprache durch integriertes Reed-Relais bei Positionierung des Geräts im zugehörigen und mit einem Magneten versehenen Wandhalter sowie drei Meter lange Anschlusschnur mit Schutzadapter und Anschlussstecker für Nebensteckkontakt (NS)

Funktionen

- 7004
- Hygienische, leicht zu reinigende antibakterielle Folientastatur mit erhabenen Tasten und eindeutigem Druckpunkt für eine sichere Bedienung

- Ruf-/Notrufauslösung durch Ruftaste rot, ähnl. RAL 3020, mit Pflegedienstsymbol, Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung
- Funktionstaste grau, ähnl. RAL 7004, konfigurierbar, zur Ansteuerung externer Systeme über potentialfreien Kontakt in der Wandeinheit bzw. als niedrig priorisierter Service-Ruf über die Rufanlage
- Diskrete Kommunikation mit dem Pflegedienst über integriertes Mikrofon und Lautsprecher
- Automatische Umschaltung zwischen diskreter Sprache und freier Sprache bei Positionierung des Geräts in zugehörigem und mit einem Magneten versehenen Wandhalter
- Die Komfortfunktion diskrete Sprachkommunikation erfordert den Anschluss an eine geeignete Kombination von sprachfähigem Zimmerterminal und Wandeinheit
- Empfohlenes Zubehör:
- Bettgalgenclip zur sicheren Befestigung des Gerätekabels am Bett, Art. Nr. 310429
- Wandhalter WH-PHG7, Art. Nr. 300591
- Optional Anschlussverlängerung zwei Meter mit DIN-Stecker rund, 7-polig, Art. Nr. 310440
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 12 V DC

Stromaufnahme aktiv: 16 mA, passiv: 11 mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 210 g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: stecken

Zum Anschluss an:

Zum Anschluss von:

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): x 42 x 20 mm

Gewicht netto: 210 g

Material: ABS, PC

Montage:

Farbe: weiß ähnl. RAL 9010

Elektrische Schnittstellen:

- 1x Nebensteckkontakt NS - Modular 8P8C - SK - Bidirektional
- 1x Sprachkommunikation - Modular 8P8C - Z-Bus P7 - Bidirektional