


Interfaces IF-IO2-ZB

Datenblatt-Nr.: 300750 / Stand: 2024/05/17

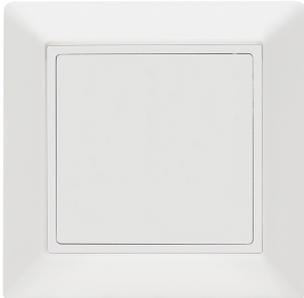

Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Interfaces IF-IO2-ZB

Artikelnummer: 300750

Bezeichnung neu: Interface IF-IO2-ZB

Kurzbeschreibung neu: IF-IO2-ZB

Bezeichnung alt: Schnittstelleneinheit 2 Eingänge,
2 Ausgänge Zimmerbus P7

Kurzbeschreibung alt: IO2-P7

Verwendung: Rufsystem P7

None

Interfaces IF-IO2-ZB zum Anschluss an den Zimmerbus verfügen über eine antibakterielle Folienoberfläche blind und ermöglichen die Einkopplung von Rufen und Meldungen über den Zimmerbus in das Rufsystem P7. So können z. B. spezielle Taster (z. B. in Vandalismus-geschütztem Design, Pilztaster, Fußtaster etc.) mit und ohne Beruhigungslicht in das Rufsystem eingebunden werden. Beim Anschluss von Rufeinheiten mit Nebensteckkontakt aus dem System P3 bleibt die Abwurfrufenerkennung weiterhin aktiv. Die standardmäßige Ruftaste mit Finde-/Beruhigungslicht steht weiterhin zur Verfügung.

Jung AS500 alpinweiß, antibakteriell

Funktionen

- Einfache Montage und Installation am Zimmerbus durch farbige gekennzeichnete Schraub-Steck-Klemmen, rastende Montage der Zentralplatte auf der Einbaueinheit und zweiteiligem Adressaufkleber für einfache Konfiguration
- Hygienische, leicht zu reinigende antibakterielle Oberfläche
- 2 optoentkoppelte Eingänge 5–30 V AC/DC
- Zwei Umschaltkontakte, max. mit je 1 A belastbar
-

- Zwei Umschaltrelais zur Ankopplung externer Geräte. Für die Einhaltung der Potentialtrennung mit 2 x MOPP nach DIN EN60601-1 ist bauseits Sorge zu tragen (z. B. durch das Stromstoßrelais STST-01, Art. Nr. 320480, bzw. STST-02, Art. Nr. 320482)
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 12 V DC

Stromaufnahme aktiv: 21 mA, passiv: 4 mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 89 g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: rasten, schrauben

Zum Anschluss an: ZB

Zum Anschluss von:

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): x 81 x 45 mm

Gewicht netto: 89 g

Material: ABS, PC

Montage: Einbau in UP-Schalterdose nach DIN 49073

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

Elektrische Schnittstellen:

- 1x Zimmerbus - Schraub-Steck-Klemme - Z-Bus P7 - Bidirektional