


## Birntaster BT-RT-2LT-NS

Datenblatt-Nr.: 310421 / Stand: 2025/04/24

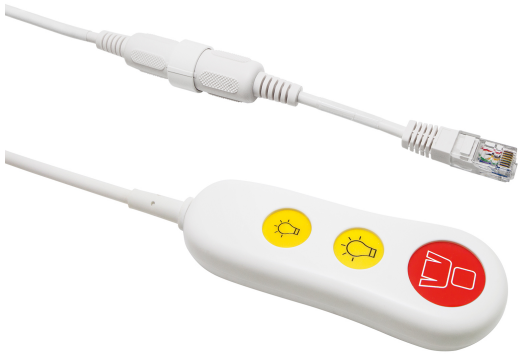

---

**Hersteller:** hospicall GmbH

---

**Produkt:** Birntaster BT-RT-2LT-NS

---

**Artikelnummer:** 310421

---

**Bezeichnung neu:** Birntaster BT-RT-2LT-NS

---

**Kurzbeschreibung neu:** BT-RT-2LT-NS

---

**Bezeichnung alt:** Birntaster hc mit Ruftaste, 2 Lichttasten und 3 m Anschlusschnur inkl. selbstlösendem Schutzadapter für zerstörungsfreien Steckerabriss

---

**Kurzbeschreibung alt:** BT-2LT-HC

---

**Verwendung:** Rufsystem P7, System 834

---

Jedem Bett muss eine Einrichtung zur Rufauslösung zugeordnet sein, die vom Patienten bequem und sicher erreichbar ist. Die Handgeräte von hospicall erfüllen nicht nur diese Anforderung der DIN VDE 0834-1, sondern berücksichtigen neben der intuitiven Bedienung durch die Patienten/Bewohner auch die Belange des Pflegedienstes bzw. der Haustechnik.

Birntaster BT-RT-2LT-NS sind die sicheren Handgeräte im Patienten-/Bewohnerumfeld und verfügen über eine große transluzente, vertieft eingebaute und dadurch gegen versehentliche Auslösung geschützte Ruftaste mit integriertem Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung, zwei Lichttasten gelb zur Steuerung von Lichtquellen (Raumlicht, Bettenlicht/Leselicht) über ein Stromstoßrelais sowie drei Meter langer Anschlusschnur und Stecker mit Schutzadapter. Der Systemanschluss und die Funktionsüberwachung erfolgen über Wandeinheiten mit Nebensteckkontakt (NS).

### Funktionen

- Ruf-/Notrufauslösung durch Ruftaste rot, mit Pflegedienstsymbol, Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung
- Steuerung von zwei Lichtquellen über Tasten gelb, mit Lampensymbolen (Raumlicht, Bettenlicht/Leselicht)

- Zerstörungsfreier Steckerabriss bei unzulässiger Zugbelastung der drei Meter langen Anschlusschnur durch selbstlösenden Schutzadapter mit Anschlussstecker (NS) für Nebensteckkontakt P7 (Modular 8P8C)
- Empfohlenes Zubehör:
- Bettgalgenclip zur sicheren Befestigung des Gerätekabels am Bett, Art. Nr. 310429
- Wandhalter ZUS-WH-BT, Art. Nr. 310446
- Optional Anschlussverlängerung zwei Meter mit DIN-Stecker rund, 7-polig, ZUS-AS-VL-2M-NS; Art. Nr. 310440
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

#### Technische Daten

Versorgungsspannung: 12-24 V DC

Stromaufnahme aktiv: 19 mA, passiv: 3 mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 161 g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: stecken

Zum Anschluss an: NS

Zum Anschluss von:

#### Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): 105 x 40 x 22 mm

Gewicht netto: 161 g

Material: ABS

Montage:

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

#### Elektrische Schnittstellen:

-