


Patientenhandgeräte PHG-RT-LS-NS

Datenblatt-Nr.: 300590 / Stand: 2026/04/26

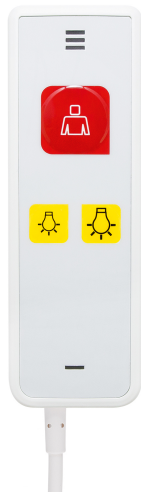

Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Patientenhandgeräte PHG-RT-LS-NS

Artikelnummer: 300590

Bezeichnung neu: Patientenhandgerät PHG-RT-LS-NS

Kurzbeschreibung neu: PHG-RT-LS-NS

Bezeichnung alt: Patientenhandgerät mit Ruftaste, 2 Lichttasten, Lautsprecher und Mikrofon P7

Kurzbeschreibung alt: PHG7

Verwendung: Rufsystem P7

Jedem Bett muss eine Einrichtung zur Rufauslösung zugeordnet sein, die vom Patienten bequem und sicher erreichbar ist. Die Handgeräte von hospicall erfüllen nicht nur diese Anforderung der DIN VDE 0834-1, sondern berücksichtigen neben der intuitiven Bedienung durch die Patienten/Bewohner auch die Belange des Pflegedienstes bzw. der Haustechnik.

Patientenhandgeräte PHG-RT-LS-NS sind Handgeräte für die diskrete Kommunikation im Patienten-/Bewohnerumfeld und verfügen über eine leicht zu reinigende antibakterielle Folientastatur mit großer transluzenter Ruftaste, integriertem Finde-/Beruhigungslicht, eine Mikrofon-/Lautsprecherkombination mit digitalem Signalprozessor für erstklassige diskrete Sprachkommunikation sowie einem berührungslosen Schaltkontakt zur Umschaltung zwischen offener und diskreter Kommunikation in Verbindung mit geeignetem Wandhalter, zwei Lichttasten gelb zur Steuerung von Lichtquellen (Raumlicht, Bettenlicht/Leselicht) über ein Stromstoßrelais sowie drei Meter langer Anschlusschnur mit Stecker. Der Systemanschluss und die Funktionsüberwachung erfolgen über Wandeinheiten mit Nebensteckkontakt (NS).

Funktionen

- Anschlusschnur drei Meter, mit Schutzadapter und Anschlussstecker für Nebensteckkontakt
-

- Hygienische, leicht zu reinigende Oberfläche mit antibakterieller Folientastatur, Tasten mit eindeutigem Druckpunkt
- Ruf-/Notrufauslösung durch Ruftaste rot, mit Pflegedienstsymbol und Status-LED rot
- Steuerung von zwei Lichtquellen über Tasten gelb, mit Lampensymbolen für Raumlicht und Betten-/Leselicht
- Diskrete Kommunikation mit dem Pflegedienst über integriertes Mikrofon und Lautsprecher
- Automatisches Umschalten zwischen diskreter und freier Sprache bei Positionierung des Geräts in zugehörigem Wandhalter
- Zerstörungsfreier Steckerabriss bei unzulässiger Zugbelastung der Anschlusschnur durch selbstlösenden Schutzadapter
- Empfohlenes Zubehör:
- Bettgalgenclip zur sicheren Befestigung des Gerätekabels am Bett, Art. Nr. 310429
- Zugehöriger Wandhalter mit Magnet, Art. Nr. 300591
- Optional Anschlussverlängerung zwei Meter mit DIN-Stecker, Art. Nr. 310440
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 12 V DC

Stromaufnahme aktiv: 16 mA, passiv: 11 mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 210 g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: stecken

Zum Anschluss an: NS

Zum Anschluss von:

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): 125 x 42 x 20 mm

Gewicht netto: 210 g

Material: ABS, PC

Montage:

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

Elektrische Schnittstellen:

- 1x Sprachkommunikation - Modular 8P8C - Z-Bus P7 - Bidirektional